



# ПРИБОР МЯГКОЙ ТЕПЛОТЫ ФОТОНОВЫЙ КОВРИК ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

! ● В целях Вашей безопасности настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с данным руководством прежде, чем приступать к эксплуатации изделия. Сохраните данное руководство для того, чтобы в будущем Вы могли воспользоваться им.



# Характеристики 1

Прибор мягкой теплоты (Фотоновый коврик) содержит турмалиновую керамику, нефритовую крошку, фотоновые медальоны.

## Турмалин

**Турмалин** – минерал из группы борсодержащих алюмосиликатов, обладающий пиро- и пьезоэлектрическими свойствами. При механическом воздействии и при нагревании, кристаллы турмалина электризуются: один конец кристалла заряжается положительно, другой – отрицательно. Это приводит к возникновению слабых электрических токов в месте контакта с кристаллами и ионизации воздуха, что обеспечивает местное прогревание и общий оздоравливающий эффект. При этом максимальное количество тепла образуется на глубине 6-8 см. Наиболее активное выделение тепла идет в тканях, богатых жидкостью. Теплообразование идет по типу локального нагрева прилежащих тканей на 2-4 градуса. Это приводит к развитию таких биофизических процессов, как

- увеличение скорости кровотока,
- понижение вязкости крови,
- ускорение движения лимфы,
- стимуляция фагоцитоза,
- уменьшение отека тканей,
- рассасывание воспалительного очага,
- уменьшение болевых ощущений.

## Нефрит

**НЕФРИТ** — высокопрочный камень с мягким блеском и богатой гаммой оттенков зеленого цвета от травянистого до изумрудного, также он может быть светлосерым, желтым, голубым и черным, в зависимости от количества железа в составе минерала. Он символизирует чистоту помыслов, решительность и бессмертие. Во многих восточных государствах его признавали священным камнем. Существует поверье, что небесный трон Будды сделан из нефрита. У римлян этот камень назывался божественным. А в Китае, например, его до сих пор считают символом красоты и благочестия. В Индии нефрит дозволялось носить лишь высоко нравственным людям. Носящий его не должен совершать дурных поступков, ибо возмездие неминуемо. В Европе считается камнем царей и князей. Английская королева Виктория имела превосходной работы нефритовый скипетр, присланный в подарок китайским императором.

Нефрит – мономинеральная горная порода, состоящая из чрезвычайно тонких волокон амфибола термолит-актинолитового ряда, имеющая характерную **спутано-волоконистую структуру**. Этот, довольно распространенный в природе минерал,



Мы благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей продукции. "VITAL RAYS" прилагает все усилия для сохранения здоровья своих клиентов. Мы желаем Вам наслаждаться здоровой, комфортной жизнью при использовании прибора мягкой теплоты "ФОТОНОВЫЙ КОВРИК".

Спасибо!

**ДОРОГИЕ  
ПОКУПАТЕЛИ  
«VITAL RAYS»!**

# 1 Характеристики

добывают в горах и по берегам рек. Крупные месторождения нефрита находятся в Китае, Новой Зеландии, Канаде, Австралии, Мексике, Зимбабве и в России на Урале. Название «нефрит» произошло от греческого слова «нефрос», что значит «почка». *Он снимает зубную боль, лечит почки, мочеполовую систему, выводящие протоки, активизирует выделительную систему, что позволяет справиться с мочекаменной и желчекаменной болезнями, нормализует сердечно-сосудистую деятельность, выводит газы и снимает вздутие живота. Нефрит прекрасно справляется с нервными заболеваниями: успокаивает буйных и выводит из депрессий упавших духом. Он лечит также систему кровообращения и костный мозг, активно устраняет неполадки с селезенкой, хорошо снимает любые внутренние и внешние воспаления. Нефрит способствует усилению регенерации, а значит, омолаживает организм, продлевая жизнь владельцу.*

## Фотоновая терапия

Светодиоды являются мощным, универсальным, терапевтическим, световым прибором, который утилизирует инфракрасный, а также и светящийся красный свет, для применения на человеческом теле. Световая энергия способствует самовосстановлению организма. Более 40 лет научных исследований в ведущих университетах по всему миру показали, что на определенной длине волны происходит стимуляция организма к самовосстановлению.


### Эффекты Фотоновой терапии:

- улучшение сосудистой циркуляции, разрастание новых капиллярных сетей;
- стимуляция выработки коллагена;
- улучшение деятельности лимфатической системы;
- увеличение синтеза РНК и ДНК;
- снижение возбудимости нервной ткани;
- увеличение фагоцитов;
- способствуют процессу заживления ран, язв, снятию воспаления тканей;
- стимулирует высвобождение ацетилхолина.

# Применение 2



Использование фотонового коврика в положении сидя.

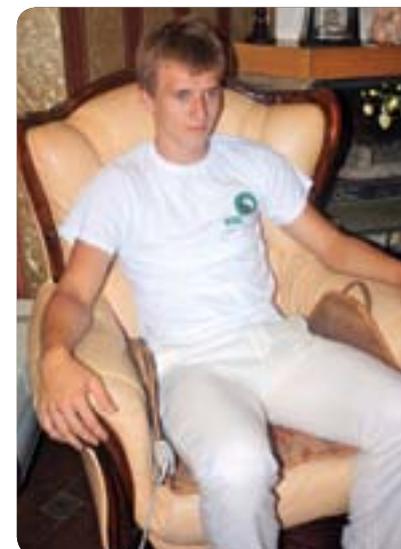

Использование фотонового коврика лёжа на полу.



## Использование «Фотонового коврика» с термомассажной кушеткой

**К**роме перечисленных выше способов применения, «Фотоновый коврик» предназначен для совместного использования вместе с многофункциональными терапевтическими аппаратами Витал Райз де Люкс или Витал Райз Классик. Совместное применение термомассажной кушетки и теплового коврика дает

замечательный терапевтический эффект. Лежа на аппарате Витал Райз расположите «Фотоновый коврик» сверху.



**И**спользуя аппарат Витал Райз накройте ноги «Фотоновым ковриком». Давление теплового матраса улучшит акупрессурный эффект. При болях в коленных суставах вы можете расположить «Фотоновый коврик» горизонтально, что-

бы он охватывал область коленей.

**И**спользование «Фотонового коврика» на область живота.



**И**спользование «Фотонового коврика» на пояснице.

**И**спользование «Фотонового коврика» в области нижних конечностей (это усилит акупрессурный эффект).



**Другие способы использования «Фотонового коврика» зависят от особенностей и проблем вашего организма.**

- Прежде, чем приступить к эксплуатации изделия, прочтите инструкцию по применению. Это даст вам возможность правильно использовать изделие.
- Убедитесь, правильно ли Вы выполняете все указания данной инструкции по применению изделия.
- Правила техники безопасности включают категории "Внимание" и "Осторожно".

- Не используйте изделие на поверхности, которая может повлечь возникновение пожара или повреждение.
- Немедленно прекратите использование изделия, если оно вышло из строя.
- В случае перебоя питания в электросети, отключите изделие от сети.



## Внимание

Ненадлежащее использование приведёт к серьёзным травмам, повреждениям, а также может привести к снижению качества изделия.



- Ремонт и замена производится только в сервисном центре VITAL RAYS.
- В случае необходимости проведения ремонта, свяжитесь с Сервисным Центром. Ремонт, производимый не специалистом, может повлечь за собой пожар или удар электрическим током.



- При отключении изделия от сети, не тяните за шнур. Не прикасайтесь к шнуру мокрыми руками. (При удалении штепселя из розетки, тяните за штепсель).
- \*Отключение штепселя из розетки за шнур может привести к удару электрическим током и пожару



- Не используйте, если шнур, штепсель или розетка повреждены.
- \*Это может привести к удару электрическим током.



- Убедитесь, что напряжение составляет 220 Вольт.
- Напряжение более или менее 220 Вольт может привести к пожару или удару электрическим током.



- Дети и инвалиды, должны использовать изделие только в присутствии ответственного лица.
- \*Не соблюдение данного требования чревато получением ожогов и травм.
- \*Не оставляйте изделие во включенном состоянии без присмотра. (Уходя из дома отключайте изделие).



- Не покрывайте изделие одеялом или другими легковоспламеняющимися предметами.
- \*Это может привести к пожару.



## Внимание

Ненадлежащее использование приведёт к серьёзным травмам, повреждениям, а также может привести к снижению качества изделия.



- Не царапать, не повреждать, не обрезать кабель терморегулятора или шнур питания. Не кладите тяжелые предметы на кабель терморегулятора или шнур питания. Не сгибайте, не скручивайте, не тяните слишком сильно кабель терморегулятора.
- \*Это может повредить изделие и испортить шнур или кабель, а также привести к пожару или удару электрическим током. (Перед использованием изделия, распрямите кабель и сетевой шнур по всей длине).



- Храните изделие, в том виде, как было упаковано изначально. Перед использованием, разверните изделие и разложите его на поверхности.
- \*Иначе, это может привести к неисправности изделия и пожару.



- Выньте вилку из розетки, когда не используете изделие.
- Хранение изделия во включенном состоянии, может повлечь удар электрическим током, а также воспламенение.



- Не допускайте попадания влаги внутрь изделия или пульта управления, так как это может привести к удару электрическим током.
- Наличие влаги внутри изделия приводит к перегреву изделия, а также может привести к электрическому удару. Немедленно прекратите эксплуатацию изделия и отключите его от сети. Используйте только после того, как изделие будет полностью просушено. В случае повреждения изделия, свяжитесь с сервисным центром.



- Не размещайте изделие на не ровной поверхности.
- Изделие может упасть, что приведет его к повреждению.


# 4 КОМПЛЕКТАЦИЯ



# ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 5

< Пульт >



< Матрас >

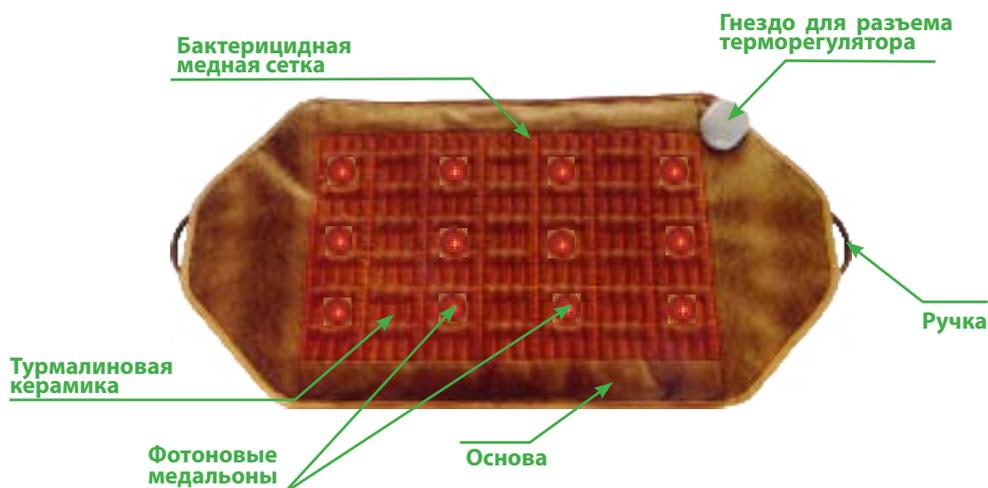
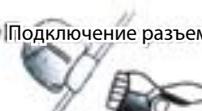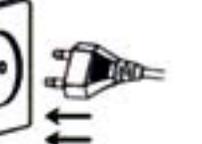
<p>1 Подключение разъема</p> 	<p>(1) Подсоедините разъем терморегулятора в гнездо терморегулятора на основе матраса. *Убедитесь, что они соответствуют друг другу.</p>
<p>2</p> 	<p>(1) Подключите изделие к электросети (Убедитесь, что напряжение в сети составляет 220 Вольт/50Герц, так как изделие рассчитано именно на эти параметры). *Запрещается включать изделие в сеть, если его сетевой шнур поврежден или розетка плохо укреплена.</p>
<p>3 Включение/выключение</p> 	<p>(1) После подключения штепселя к сети, нажмите кнопку "Включить/Выключить" на терморегуляторе. Загорится лампочка питания. (2) Нажмите кнопку "Включить/Выключить" для того, чтобы отключить изделие.</p>
<p>4 Регулирование температуры.</p> 	<p>(1) После того, как вы нажали кнопку "Включить/Выключить" поверните ручку регулятора температуры на желаемый уровень нагрева. (Минимальная температура 30°C, максимальная температура 65°C). *Длительное пользования в режиме "МАКС" может вызвать ожог. Выбирайте уровень "МИН", если намерены пользоваться изделием длительное время. (2) Когда вы вращаете ручку терморегулятора, дисплей показывает выставяемую температуру. Когда вы перестаете вращать, на дисплее отображается реальная температура изделия на данный момент времени</p>
<p>5 Отключение изделия.</p> 	<p>(1) Выньте штепсель из розетки, когда изделие не используется.</p>

## Уход.

- 1) После эксплуатации изделия, обязательно выньте шнур изделия из розетки.
- 2) Используйте полотенце или другую сухую ткань для удаления пыли с поверхности изделия и регулятора температуры.
- 3) Не применяйте для очистки изделия моющие средства, а также бензин или растворитель, так как это может повредить изделие.
- 4) Запрещается мыть изделие и терморегулятор.  
(это может привести к удару электрическим током)
- 5) После чистки, полностью просушите изделие.

## Хранение.

- 1) Избегайте попадания прямых солнечных лучей на изделие, а также не храните в местах резкого перепада температуры и высокой влажности.
- 2) Не храните изделие в загрязненных местах, а также местах повышенной влажности.
- 3) Не сминаяте и не сжимайте изделие при хранении.  
(Это может повредить изделие).
- 4) Убедитесь в том, что шнур не перекручен, когда храните изделие.
- 5) Храните изделие в сухом месте, сложенным вдвое в сумке, прилагаемой в комплекте.
- 6) Один раз в месяц просушите изделие в хорошо проветриваемом помещении.

<b>Наименование изделия</b>	Прибор мягкой теплоты «Фотонный коврик»
<b>Модель</b>	CGN-1000-3P
<b>Источник питания</b>	AC220V 50Hz
<b>Потребляемая мощность</b>	64W±10%
<b>Диапазон Температуры</b>	30°C-65°C
<b>Размер</b>	980x450x20mm(Wx Lx H)
<b>Вес</b>	5kg

## Если изделие не работает, убедитесь в следующем:

- \*Подключено ли изделие к сети.
- \*Подсоединен ли кабель терморегулятора к основе матраса
- \*Нажата ли кнопка "Включить/Выключить" на терморегуляторе.
- \*Установлена ли температура на отметке "МАКС"

## Запрос на сервисное обслуживание

- ▶ Если изделие все равно не работает, немедленно прекратите его использование, выключите и выньте шнур из розетки.
- ▶ Обратитесь в Центр потребителей "VITAL RAYS"  
Телефон Центра потребителей "VITAL RAYS"

## Наименование изделия: Прибор мягкой теплоты (Фотонный Коврик)

На данное изделие распространяется гарантия качества в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

Серийный номер			
Дата приобретения			
Срок гарантии			
Покупатель	ФИО		
	Адрес		
Продавец	Филиал	Тел	

\*В случае обнаружения повреждения изделия, прежде всего, следует обратиться в центр «VITAL RAYS», в котором изделие было приобретено.

## Сервисное обслуживание клиентов.

- 1) Гарантийный срок изделия 1 год.
- 2) Любое повреждение, которое произошло при правильном использовании в соответствии с назначением и требованиями руководства по эксплуатации, будет устранено бесплатно.

## Покупатель обязан будет оплатить услуги ремонта в гарантийный период в случае, если:

Повреждения произошли вследствие нарушений правил эксплуатации изделия.

- ▶ Повреждения произошли вследствие нарушений правил техники безопасности, описанных в руководстве по эксплуатации.
- ▶ Повреждения произошли в результате ремонта изделия силами покупателя.
- ▶ Повреждение изделия произошло по причинам, не предусмотренным данной гарантией.

- 3) Не предусмотрена повторная выдача гарантийного талона.  
Храните гарантийный талон в надежном месте.

Данным талоном гарантируется бесплатное сервисное обслуживание на условиях, описанных выше. Данная гарантия не ограничивает прав покупателя по закону, защищающему права потребителей. В случае возникновения вопросов по истечению срока гарантийного обслуживания, пожалуйста, обращайтесь в Ваш сервисный центр «VITAL RAYS».



**VITAL RAYS**